

I N S T R U C T I V O

Soluciones protéticas para implantes Línea FIS



Implantes Dentales
FEDERA

CORONA CEMENTADA

Pilar con tornillo pasante



Utilización de Ø 4.8
como ejemplo


Corona cementada

Prótesis implantes FIS
cilíndrico y cónico


Ø 3.3

Ø 4.1/4.8

Toma de impresión

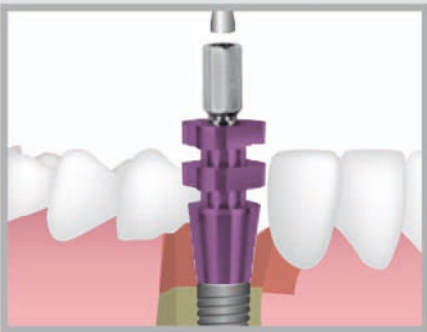

1 - Toma de impresión

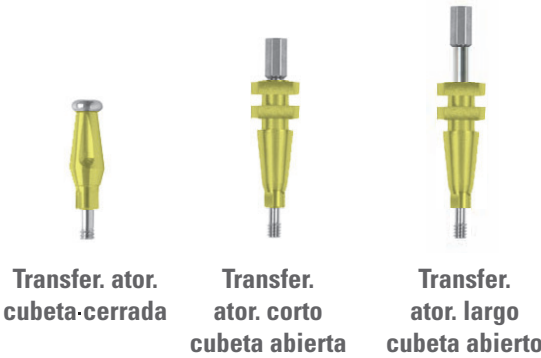

Transfer. ator.
cubeta-cerrada

Transfer. ator. corto
cubeta abierta

Transfer. ator. largo
cubeta abierto



Transfer. ator.
cubeta cerrada


Transfer. ator. corto
cubeta abierta

Transfer. ator. largo
cubeta abierto

Análogos



2 - Elaboración del modelo maestro

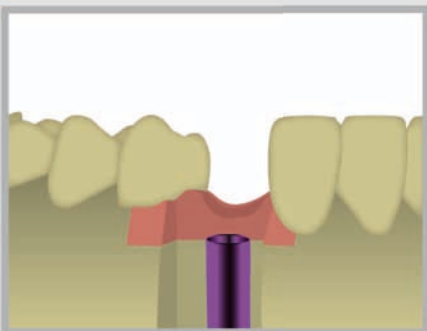


Análogo
de implante




Análogo
de implante

Selección del pilar
Calcinables

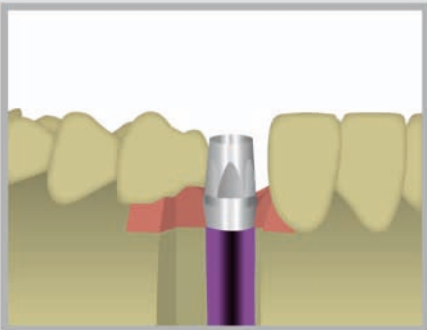

3 - Escaneado del modelo

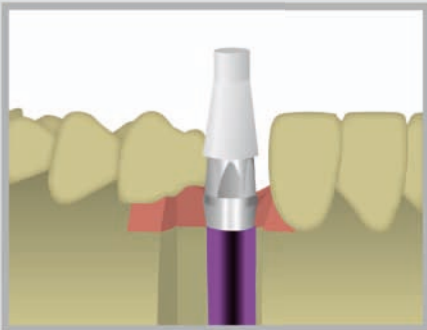

Pilar diámetro 3.3
altura 4 mm

Pilar diámetro 3.3
altura 5.5 mm




Pilar diámetro 4.1
altura 4 mm

Pilar diámetro 4.1
altura 5.5 mm



Pilar diámetro 4.1
altura 4 mm

Pilar diámetro 4.1
altura 5.5 mm

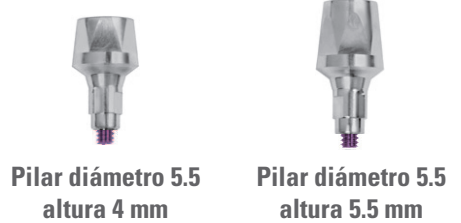

Pilar diámetro 5.5
altura 4 mm

Pilar diámetro 5.5
altura 5.5 mm



Calcinable para
pilar Ø 3.3




Calcinable para
pilar Ø 4.1




Calcinable para
pilar Ø 3.3



Calcinable para
pilar Ø 4.1

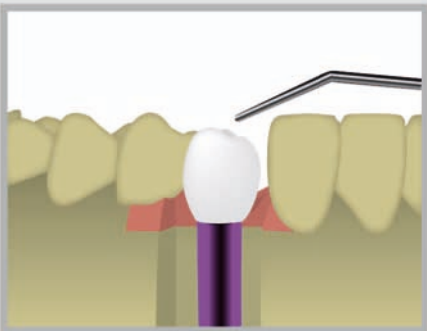

5 - Fabricación de la restauración

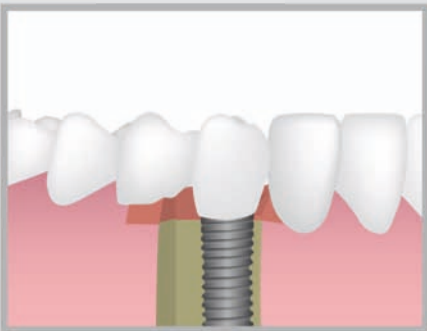

6 - Colocación de la restauración




Corona atornillada

Prótesis implantes FIS
cilíndrico y cónico




Ø 3.3

Ø 4.1/4.8

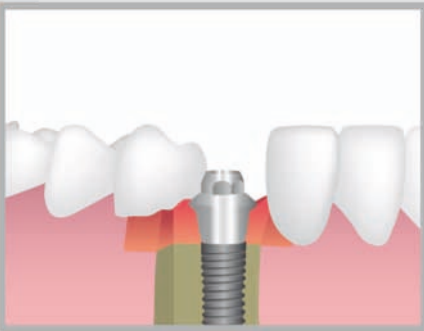

1 - Seleccionar del pilar

Selección del pilar

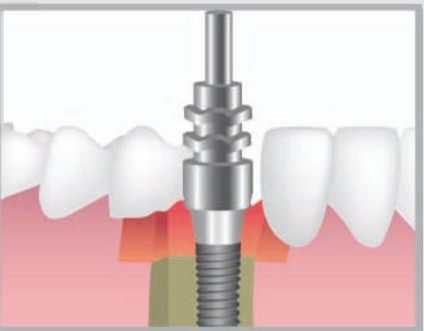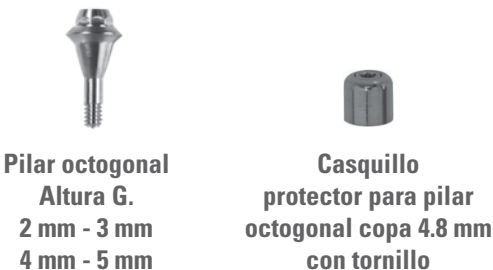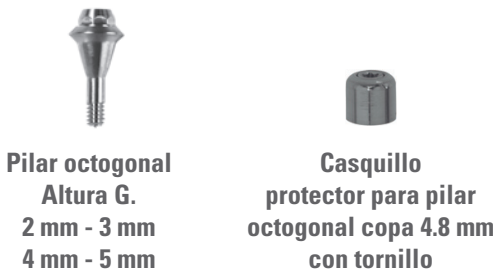

2 - Toma de impresión



Toma de impresión



3 - Elaboración del modelo maestro


Análogos



4 - Fabricación de la restauración

Calcinables





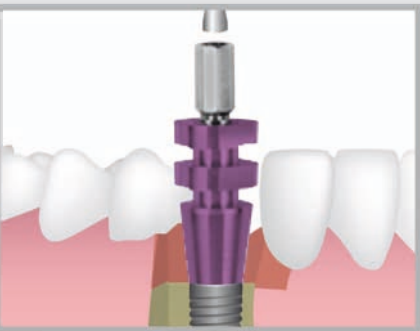


1 - Toma de impresión




2 - Elaboración del modelo maestro

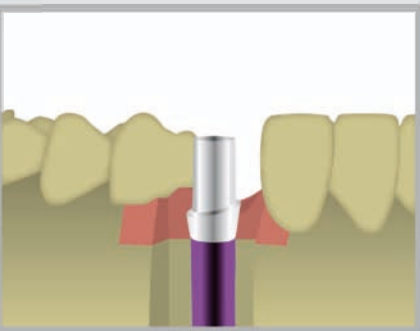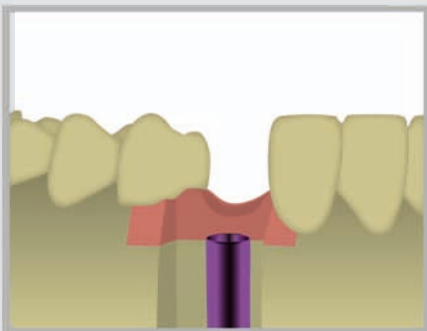

4 - Selección del pilar

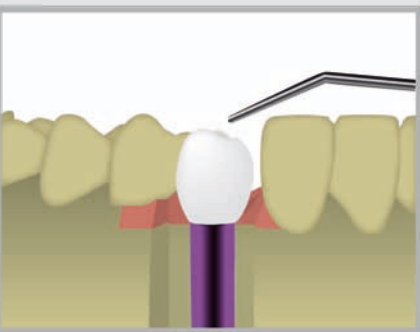


5 - Fabricación de la restauración

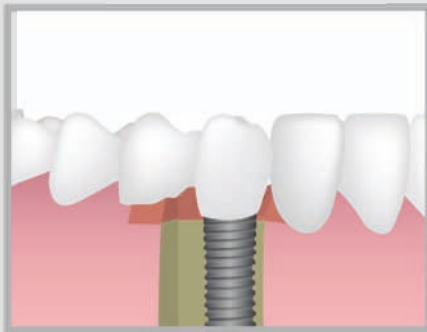

6 - Colocación de la restauración



Prótesis implantes FIS cilíndrico y cónico	Prótesis cementada	
	Ø 3.3	Ø 4.1/4.8
Toma de impresión	 Transfer. ator. cubeta cerrada  Transfer. ator. corto cubeta abierta  Transfer. ator. largo cubeta abierto	 Transfer. ator. cubeta cerrada  Transfer. ator. corto cubeta abierta  Transfer. ator. largo cubeta abierto
Análogos	 Análogo de implante	 Análogo de implante
Selección del pilar	 Pilar anatómico Altura G. 2 mm - 3.5 mm  Pilar angulado 15º Altura G. 2 mm - 3.5 mm	 Pilar anatómico Altura G. 2 mm - 3.5 mm  Pilar angulado 15º Altura G. 2 mm - 3.5 mm

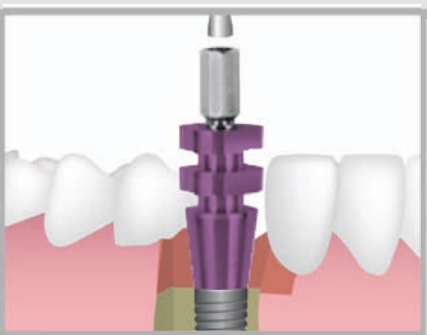


1 - Toma de impresión




2 - Elaboración del modelo maestro

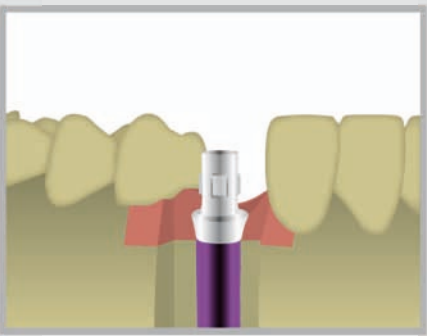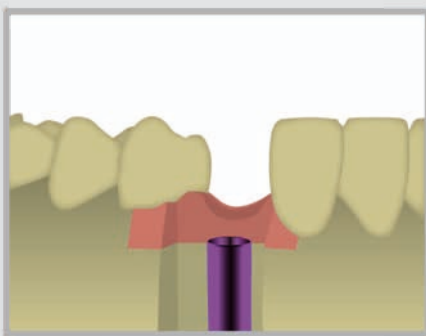

4 - Selección del pilar

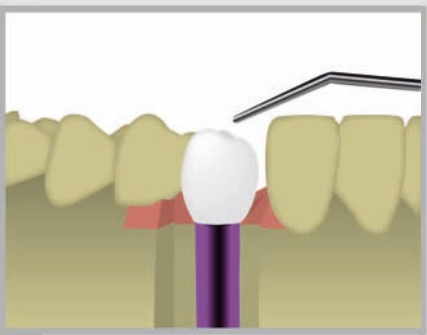


5 - Fabricación de la restauración

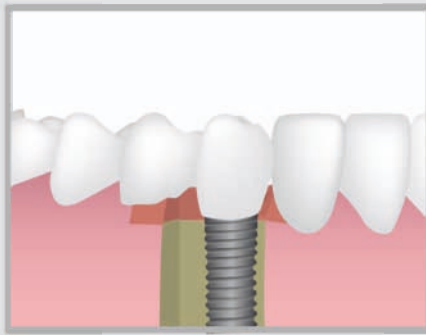

6 - Colocación de la restauración



Prótesis implantes FIS cilíndrico y cónico	Prótesis Cementada-atornillada	
	 Ø 3.3	 Ø 4.1/4.8
Toma de impresión	 Transfer. ator. cubeta cerrada  Transfer. ator. corto cubeta abierta  Transfer. ator. largo cubeta abierto	 Transfer. ator. cubeta cerrada  Transfer. ator. corto cubeta abierta  Transfer. ator. largo cubeta abierto
Análogos	 Análogo de implante	 Análogo de implante
Selección del pilar	 Pilar multiplataforma Altura G. 1 mm  Pilar atornillado para corona cerámica cementada c/tornillo para implante FIS Ø 3.3 mm	 Pilar multiplataforma Altura G. 1 mm  Pilar atornillado para corona cerámica cementada c/tornillo para implante FIS Ø 4.1 mm Ø 4.8 mm

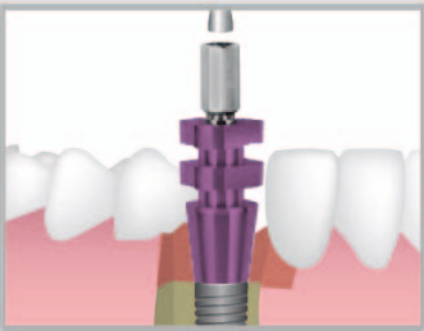


1 - Toma de impresión




2 - Elaboración del modelo maestro

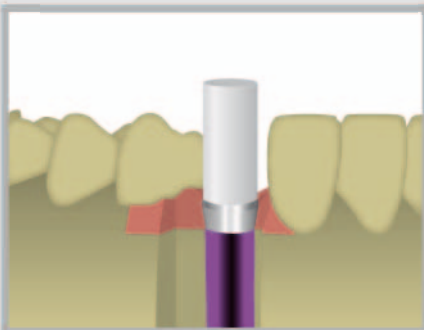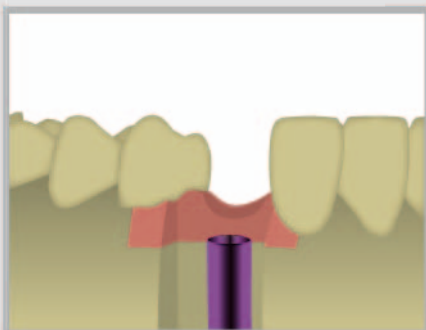

4 - Selección del pilar

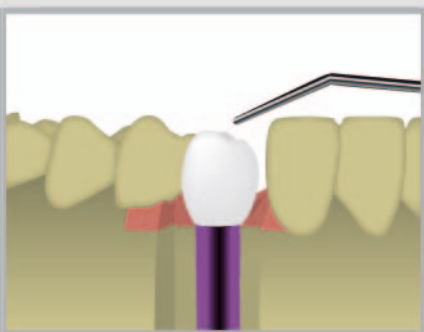

5 - Fabricación de la restauración

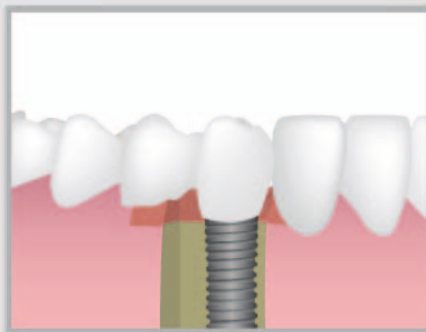

6 - Colocación de la restauración

Prótesis implantes FIS
cilíndrico y cónico

Prótesis cemento atornillada

Ø 3.3

Ø 4.1/4.8

Toma de impresión



Transfer. ator.
cubeta cerrada



Transfer.
ator. corto
cubeta abierta



Transfer.
ator. largo
cubeta abierto



Transfer. ator.
cubeta cerrada



Transfer.
ator. corto
cubeta abierta



Transfer.
ator. largo
cubeta abierto

Análogos



Análogo
de implante



Análogo
de implante


Selección del pilar



Pilar de cromo-cobalto
para corona





Pilar de cromo-cobalto
para corona

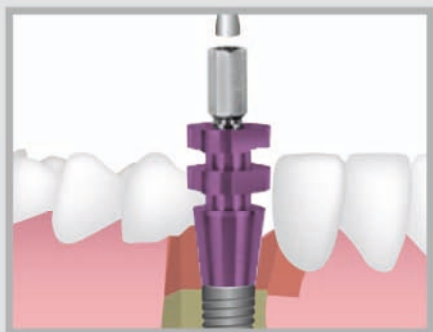



1 - Toma de impresión



2 - Elaboración del modelo maestro

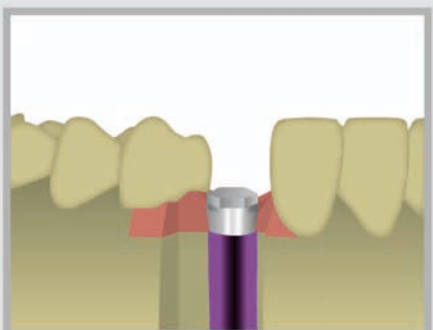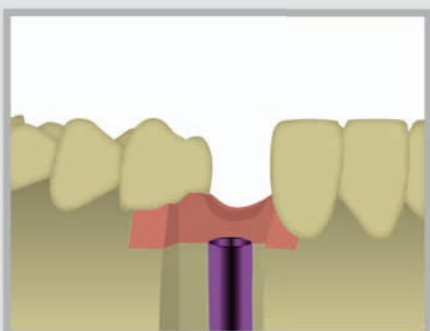

3 - Escaneado del modelo

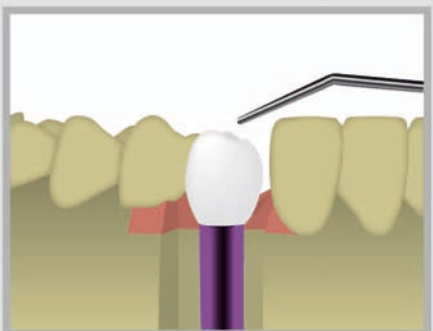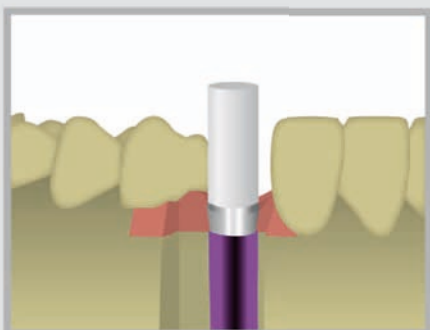

5 - Fabricación de la restauración



6 - Colocación de la restauración

Prótesis implantes FIS
cilíndrico y cónico

Prótesis atornillada

Ø 3.3

Ø 4.1/4.8

Toma de impresión

Transfer. ator.
cubeta cerrada

Transfer.
ator. corto
cubeta abierta

Transfer.
ator. largo
cubeta abierto

Transfer. ator.
cubeta cerrada

Transfer.
ator. corto
cubeta abierta

Transfer.
ator. largo
cubeta abierto

Análogos



Análogo
de implante



Análogo
de implante

Selección del pilar
y calcinables



Pilar hexagonal
Altura G. 1 mm -
2 mm - 3 mm




Pilar hexagonal
Altura G. 1 mm -
2 mm - 3 mm



Calcinable
para pilar hexagonal
para corona y puente





Calcinable
para pilar hexagonal
para corona y puente

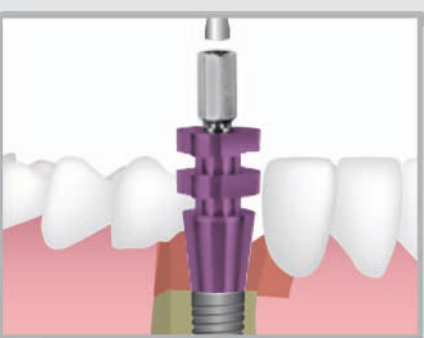


1 - Toma de impresión




2 - Elaboración del modelo maestro

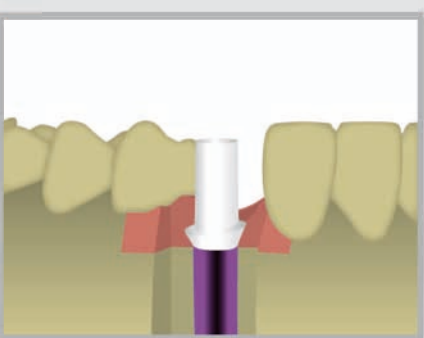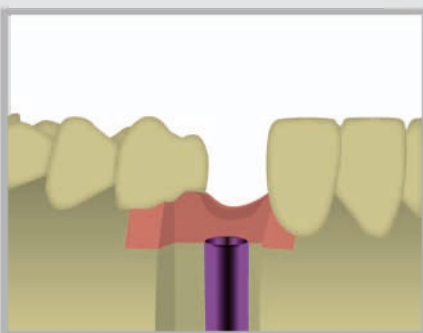

4 - Selección del pilar

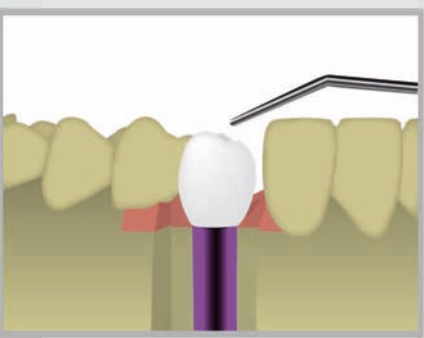

5 - Fabricación de la restauración

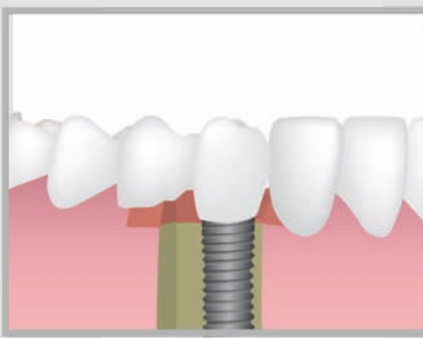

6 - Colocación de la restauración

Prótesis implantes FIS
cilíndrico y cónico

Toma de impresión




Análogos

Selección del pilar

Prótesis atornillada


Ø 3.3

Ø 4.1/4.8

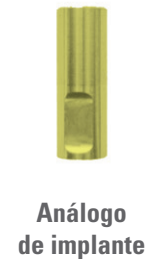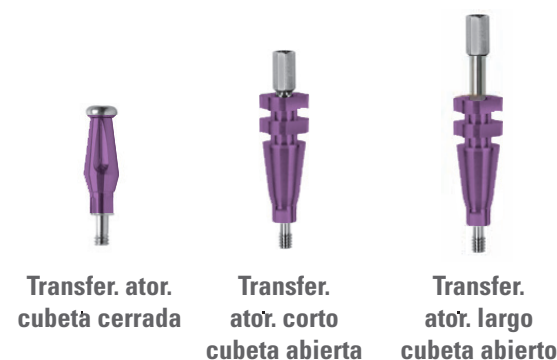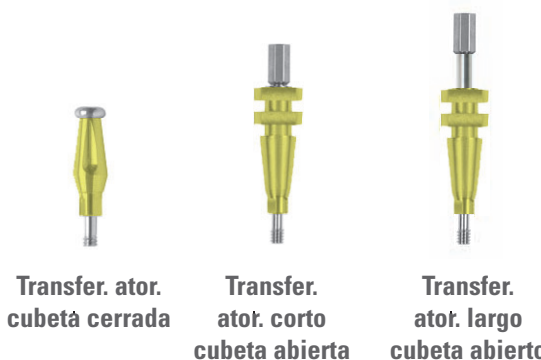


PUENTE CEMENTADO



Pilar con tornillo pasante

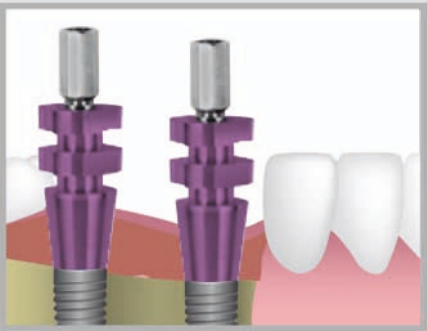


1 - Toma de impresión

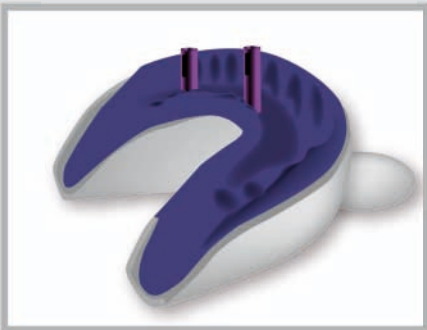


2 - Elaboración del modelo maestro

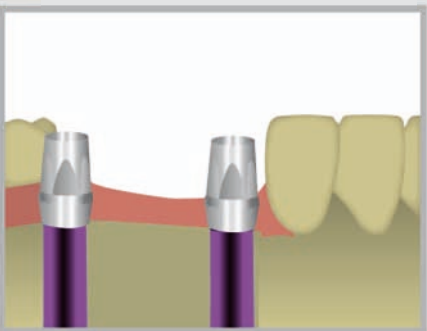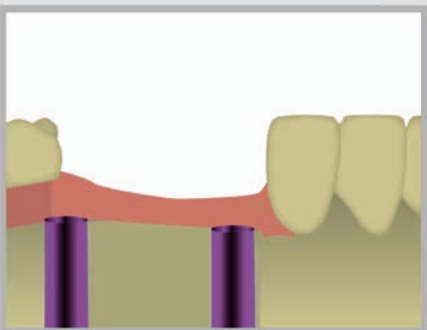

3 - Selección del pilar

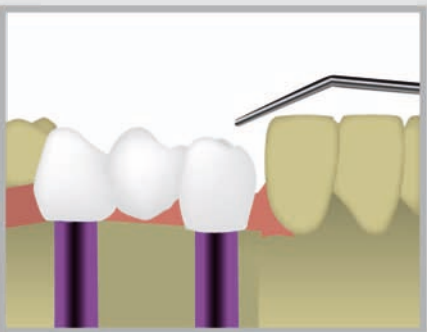

4 - Fabricación de la restauración

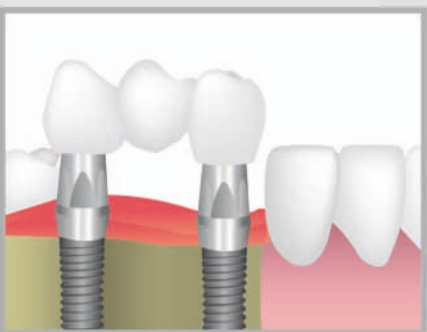

5 - Colocación de la restauración

Prótesis implantes FIS
cilíndrico y cónico

Toma de impresión

Análogos

Selección del pilar
Calcinables

Puente Cementado

Ø 3.3

Ø 4.1/4.8

Transfer. ator.
cubeta cerrada

Transfer.
ator. corto
cubeta abierta

Transfer.
ator. largo
cubeta abierto

Transfer. ator.
cubeta cerrada

Transfer.
ator. corto
cubeta abierta

Transfer.
ator. largo
cubeta abierto



Análogo
de implante



Análogo
de implante

Pilar diámetro 3.3
altura 4 mm

Pilar diámetro 3.3
altura 5.5 mm

Pilar diámetro 4.1
altura 4 mm

Pilar diámetro 4.1
altura 5.5 mm

Pilar diámetro 4.1
altura 4 mm

Pilar diámetro 4.1
altura 5.5 mm

Pilar diámetro 5.5
altura 4 mm

Pilar diámetro 5.5
altura 5.5 mm

Calcinable para
pilar Ø 3.3


Calcinable para
pilar Ø 4.1

Calcinable para
pilar Ø 3.3

Calcinable para
pilar Ø 4.1

PUENTE ATORNILLADO



Pilar octogonal

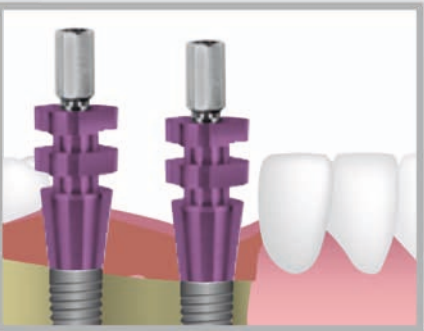



1 - Toma de impresión




2 - Elaboración del modelo maestro

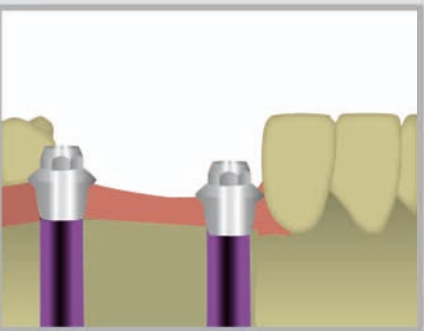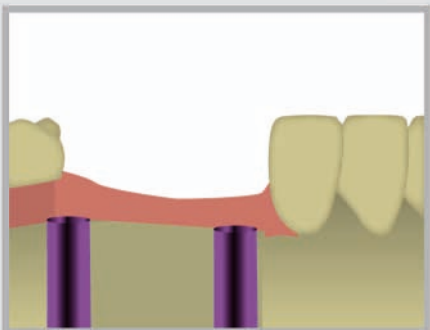

3 - Selección del pilar

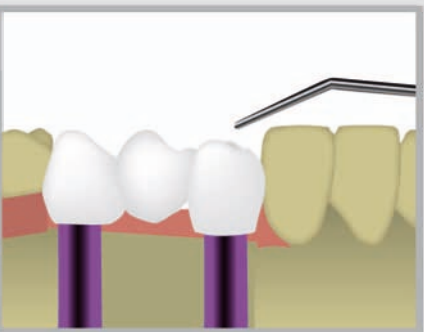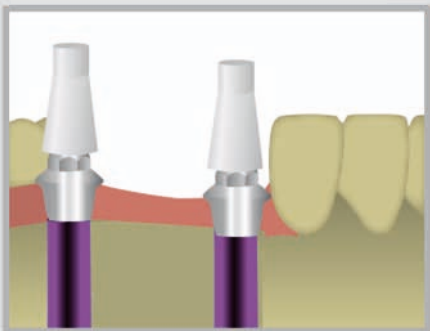

4 - Fabricación de la restauración

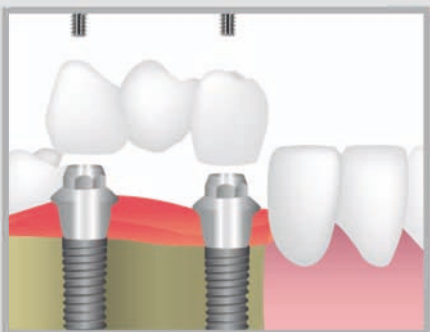


5 - Colocación de la restauración


Prótesis implantes FIS cilíndrico y cónico	Puente atornillado	
	Ø 3.3	Ø 4.1/4.8
Toma de impresión		
Análogos		
Selección del pilar y calcinables		

PUENTE CEMENTADO



Pilar base cromo - cobalto

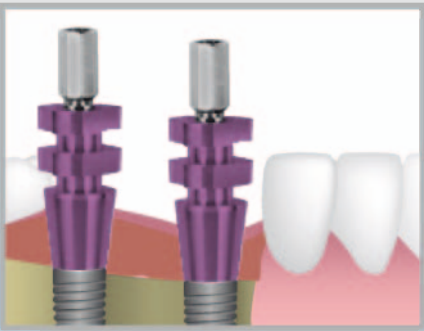


1 - Toma de impresión

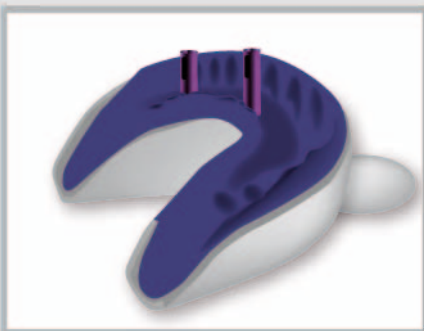


2 - Elaboración del modelo maestro

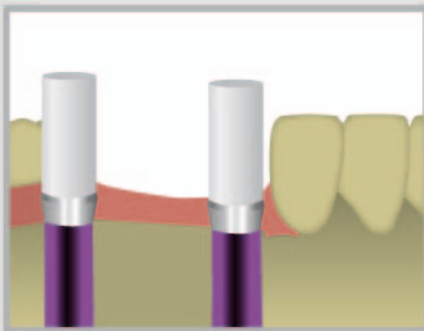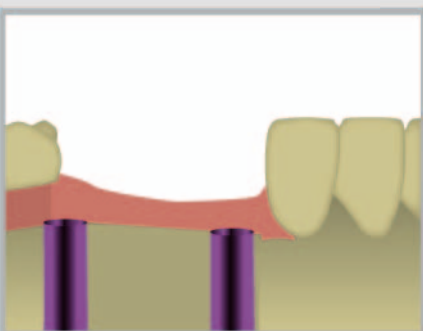

3 - Selección del pilar

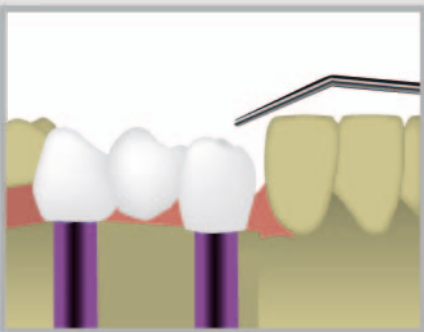

4 - Fabricación de la restauración

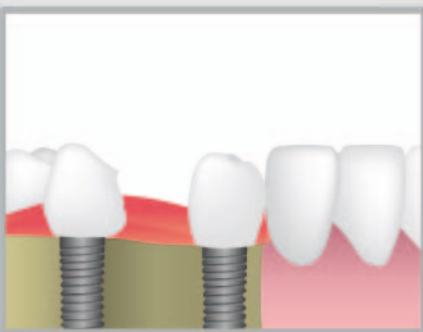

5 - Colocación de la restauración

Prótesis implantes FIS cilíndrico y cónico	Puente cemento atornillado	
	Ø 3.3	Ø 4.1/4.8
Toma de impresión	 Transfer. ator. cubeta cerrada  Transfer. ator. corto cubeta abierta  Transfer. ator. largo cubeta abierto	 Transfer. ator. cubeta cerrada  Transfer. ator. corto cubeta abierta  Transfer. ator. largo cubeta abierto
Análogos	 Análogo de implante	 Análogo de implante
Selección del pilar	 Pilar de cromo-cobalto	 Pilar de cromo-cobalto